

Ansur Testautomatiserings- software

Technische gegevens



Ansur-testautomatiseringssoftware transformeert de manier waarop testgegevens worden verzameld, gemeten en opgeslagen om risico's te beperken en wettelijke conformiteit te beheren.

Het is de beste digitale oplossing voor kwaliteitscontrole (QA) voor professionals in ziekenhuizen waarmee productiviteit wordt gemaximaliseerd en winstmarges worden vergroot. Deze software standaardiseert het werk en verkort de testtijden ten behoeve van zowel verhoogde operationele efficiëntie als minder menselijke fouten bij het testen conform QA-regelgeving en preventief onderhoud.

Met Ansur kunnen meerdere apparaten tegelijkertijd worden getest. De resultaten worden automatisch geanalyseerd ten opzichte van testgrenswaarden voor conformiteit met veiligheidsnormen en ziekenhuisspecifieke QA-protocollen.

De testresultaten worden elektronisch vastgelegd en digitaal opslagen in records met versiebeheer in CMMS of een andere database naar keuze. De gegevens kunnen worden beheerd op basis van gebruikersmachtigingsniveaus. De digitale gegevens kunnen dan worden gebruikt voor trendanalyse om de behoefte aan onderhoud te voorspellen, uitvaltijd van apparatuur te minimaliseren en om unieke PM-planningen te rechtvaardigen om te voldoen aan de vereisten van wereldwijde conformiteitsgroepen, zoals de Joint Commission, IEC en andere.

Belangrijkste kenmerken:

- U kunt aangepaste elektronische testprotocollen maken en beheren zodat u niet langer afhankelijk bent van servicehandleidingen
- Leid gebruikers door een stapsgewijs testprocedé en zorg zo voor gestandaardiseerde tests en minimale training
- Genereer testrapporten (PDF of MTR) volgens de vereisten met het benodigde niveau aan gegevens om te voldoen aan regelgeving
- Gebruik gepersonaliseerde afbeeldingen, illustraties en grafieken om het testen makkelijker te maken
- Analyseer automatisch de resultaten ten opzichte van testlimieten die zijn gegeven door wereldwijde normen of organisaties
- Goedgekeurd voor 21CFR deel 11. Gebruikers kunnen hun eigen handtekening maken en sjablonen en resultaten ondertekenen. (Deze functie kan worden uitgeschakeld)
- Testrecords en gegevens worden digitaal opgeslagen met volledig versiebeheer
- U kunt machtigingsniveaus toewijzen om de toegang tot de software te beheren. Niveaus zijn bijvoorbeeld Gebruiker, Auteur en Beheerder (Deze functie kan worden uitgeschakeld)
- Minder testtijd per medisch apparaat, test meerdere apparaten tegelijkertijd en voer meerdere PM-tests uit in één procedure
- Gegevens zijn gemakkelijk traceerbaar met elektronische archivering. Records kunnen gedetailleerd worden afgedrukt
- Zorg voor uniforme en dus voorspelbare testprocedures en -tijd met zowel kant-en-klare als aangepaste testsjablonen
- Gegevensextractie maakt trendanalyse en analyse en rapportage mogelijk

Technische specificaties

Pc-hardwarevereisten

- Intel® Pentium® 4 2,0 GHz FSB @400 MHz of snellere processor
- 512 MB RAM
- Microsoft®-besturingssysteem: Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8
- 50 MB vrije hardeschijfruimte voor software
- Hardeschijfruimte (vanaf 100 k tot meerdere megabytes) voor resultaat- en sjabloonbestanden
- .NET Framework versie 2.0 of later


Pc-softwarevereisten - met elektronische handtekening

Deze software is vereist op de centrale pc (bij netwerkconfiguratie) of op elke pc (bij configuratie zonder netwerk):


- Microsoft SQL® Server 2005 Express
- Ansur Executive Server

Overige vereisten

- Licentiecode voor elke simulatie-/analyse-invoegtoepassing van Fluke Biomedical
- Eén of meer Ansur-compatibele simulators of analyzers van Fluke Biomedical

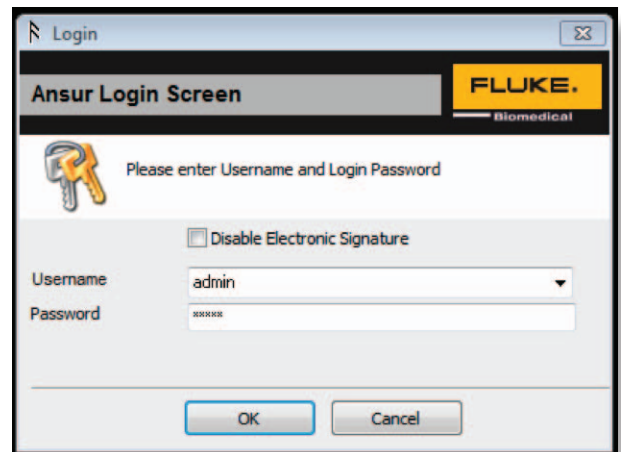

Ansur-softwareaanmeldscherm

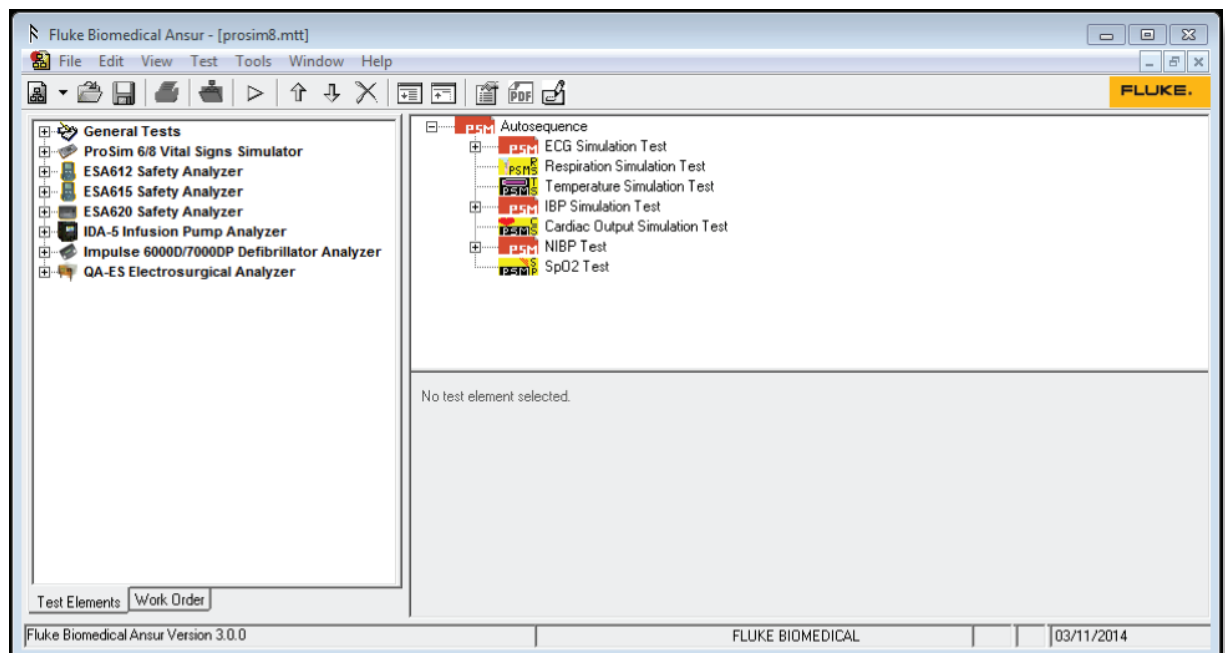

Ansur-softwaretestsjablonen

Bestelinformatie

Ansur Executive moet zijn geïnstalleerd voordat de invoegtoepassingen kunnen worden gebruikt. Alle invoegtoepassingen zijn exclusief voor een bepaald apparaat van Fluke Biomedical. Eén invoegtoepassingslicentie is geldig voor één computer. Voor meerdere computers moeten meerdere licenties van de gewenste invoegtoepassing worden aangeschaft.

Verkrijgbare invoegtoepassingen

Koop de invoegtoepassingen die u nodig heeft en voeg dan meer invoegtoepassingen of licenties toe naarmate u meer analyse- of simulatieapparatuur van Fluke Biomedical koopt.

Onderdeelnr.	Model	Onderdeelbeschrijving
2462982	11000	Ansur-testuitvoeringsversie, hoofdprogramma
2463002	11050	Ansur-testsoftware, QA-ST-invoegtoepassing
2463016	11200	Ansur-testsoftware, QA-90-invoegtoepassing
2463033	12712	Ansur-testsoftware, Pro-soft DAEG, testprotocolsoftware
2461775	13600	Ansur-testsoftware, QA-40M/45-invoegtoepassing
2461979	15200	Ansur-testsoftware, QA-IDS/LAGU-invoegtoepassing
2462024	16220	Ansur-testsoftware, QA-VTM-invoegtoepassing
2462644	17520	Ansur-testsoftware, QA-1290-invoegtoepassing
2556755	20200	Ansur-testsoftware, licentie voor ESA601-invoegtoepassing
2755836	ANSUR BP PUMP 2	Ansur-testsoftware, licentie voor BP Pump 2-invoegtoepassing
3454829	ANSUR ESA612	Ansur-testsoftware, licentie voor ESA612-invoegtoepassing
4165219	ANSUR ESA615	Ansur-testsoftware, licentie voor ESA615-invoegtoepassing
3116463	ANSUR ESA620	Ansur-testsoftware, licentie voor ESA620-invoegtoepassing
3935677	ANSUR IDA-4 PLUS	Ansur-testsoftware, licentie voor IDA-4 Plus-invoegtoepassing
4354503	ANSUR IDA-5	Ansur-testsoftware, licentie voor IDA-5-invoegtoepassing
2817641	ANSUR IMPULSE 4000	Ansur-testsoftware, licentie voor IDA-4000-invoegtoepassing
3091370	ANSUR IMPULSE 7000	Ansur-testsoftware, licentie voor Impulse 6000D/7000DP-invoegtoepassing
2817203	ANSUR INDEX 2	Ansur-testsoftware, licentie voor Index 2-invoegtoepassing
4034627	ANSUR PROSIM 6/8	Ansur-testsoftware, licentie voor Prosim 6/8-invoegtoepassing
2461802	ANSUR QA-ES	Ansur-testsoftware, licentie voor QA-ES-invoegtoepassing
2817226	ANSUR QED 6	Ansur-testsoftware, licentie voor QED-6-invoegtoepassing
3337356	ANSUR TNT 12000	Ansur-testsoftware, licentie voor TNT 12000-invoegtoepassing
3837485	ANSUR VT	Ansur-testsoftware, licentie voor VT Plus/VT Mobile-invoegtoepassing

Toewijding aan conformiteit van Fluke Biomedical

Als fabrikant van medische testapparatuur erkennen en volgen we bij de ontwikkeling van onze producten bepaalde kwaliteitsnormen en -certificeringen. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 13485 voor medische apparaten en onze producten zijn:

- CE-gecertificeerd, indien vereist
- NIST-traceerbaar en -gekalibreerd
- UL-, CSA-, ETL-gecertificeerd, indien vereist
- NRC-conform, indien vereist

Fluke Biomedical.

Trusted for the measurements that matter.

Fluke Biomedical

6045 Cochran Road
Cleveland, OH 44139-3303 VS

Fluke Biomedical Europe

Science Park Eindhoven 5110
5692 EC Son, Nederland

Voor meer informatie neemt u contact met ons op:

In de VS (800) 850-4608 of Fax (440) 349-2307
In Europa/Midden-Oosten/Afrika +31 40 267 5435 of
Fax +31 40 267 5436
Vanuit andere landen +1 (440) 248-9300 of
Fax +1 (440) 349-2307
E-mail: sales@flukebiomedical.com
Internet: www.flukebiomedical.com

©2015 Fluke Biomedical.
Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
Gedrukt in de V.S. 3/2015 6004682a-nl

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder
schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.