

Ansurs Testautomatisering Software

Tekniske data



Ansurs test-automatiseringssoftware forandrer den måde, data indsamles, måles og gemmes på, for at nedsætte risici og håndtere overholdelse af regulativer. Det er den førende digitale løsning til at maksimere produktiviteten og øge profitabiliteten for kvalitetssikrings-medarbejdere (QA) på hospitaler. Denne software standardiserer arbejde og nedsætter testtiden, både med hensyn til operationel effektivitet og nedsættelse af menneskelige fejl i forbindelse med tests af QA-regulativer og forebyggende vedligeholdelse.

Ansurs gør det muligt at teste flere forskellige enheder samtidigt og bedømmer automatisk pass/fail-resultater i forhold til test-grænseværdier med hensyn til overholdelse af sikkerhedsstandarder og hospitals-specifik QA-protokol.

Testresultater optages elektronisk og gemmes digitalt i versionskontrollerede arkiver i CMMS, eller alternative databaser efter eget valg. Datahåndtering kan finde sted baseret på brugerautorisations-niveauer. Digitale data kan herefter bruges til trend-analyse for at forudsige servicebehov, minimere nedetid for udstyr, samt retfærdiggøre unikke PM-tidsplaner for at kunne imødekomme krav fra verdensomspændende reguleringsorganisationer som the Joint Commission, IEC og andre.

Vigtige features:

- Gør det muligt at oprette og håndtere tilpassede testprotokoller elektronisk for at eliminere nødvendigheden af servicemanualer
- Guider brugere trinvis gennem testprocessen for at sikre standardiseret test og for at minimere behovet for uddannelse
- Genererer testrapporter (PDF eller MTR) afhængigt af krav, med det nødvendige dataniveau for at sikre kompliance
- Gør det muligt at benytte egne billeder, illustrationer og grafer, med henblik på at gøre det nemmere at teste ordentligt
- Bedømmer automatisk pass/fail-resultater i forhold til test-grænseværdier fra globale standarder eller organisationer
- 21CFR Part 11 compliant. Brugere kan oprette deres egen signatur og underskrive skabeloner og resultater. (Denne feature kan slås fra)
- Gemmer det komplette versionskontrollerede testarkiv og data elektronisk
- Der kan tildeles autorisationsniveauer til at håndtere adgangstilladelser til softwaren. Niveauer omfatter Bruger, Forfatter og Administrator (denne feature kan slås fra)
- Nedsætter testtiden pr. medicinske enhed, tester flere enheder på samme tid og udfører adskillige PM-tests i en enkelt procedure
- Tilbyder nem datasporing med elektronisk arkivering og udprintning af detaljerede arkiver
- Sikrer, at testprocedurer og -tid er ensartede og dermed forudsigelige både i forbindelse med skabeloner, der er klar til brug, og tilpassede skabeloner
- Datatræk har trend-analyse og rapporteringsmulighed

Tekniske specifikationer

Minimumskrav til PC-hardware

- Intel® Pentium® 4 2.0 GHz FSB @400 MHz eller hurtigere processor
- 512 MB RAM
- Microsoft® operativsystem: Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8
- 50 MB tilgængelig plads på harddisk til softwaren
- Harddiskplads (fra 100 k til adskillige megabyte) til resultat- og skabelonfiler
- Net framework version 2.0 eller nyere


Minimumskrav til PC-software-med elektronisk signatur

Følgende software er nødvendig på den centrale PC (til konfiguration med netværk) eller på hver enkelt PC (til konfiguration uden netværk):


- Microsoft SQL® Server 2005 Express
- Ansur Executive Server

Andre krav

- Licensnøgle til hver enkelt Fluke Biomedical simulator-/analyse-plug-in
- En eller flere Ansur-kompatible Fluke Biomedical-simulatorer eller -analyseværktøjer

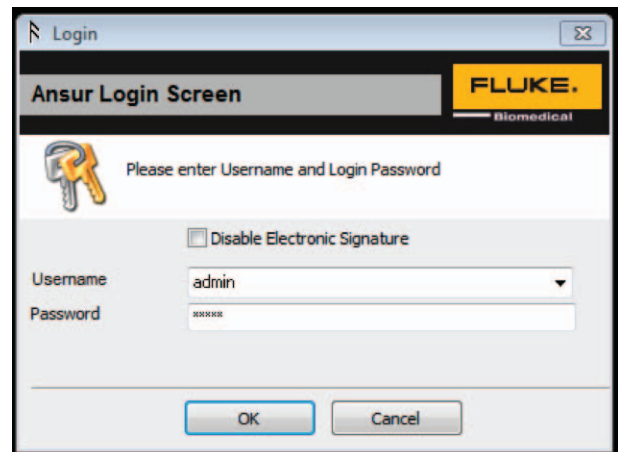

Ansur software login-skærm

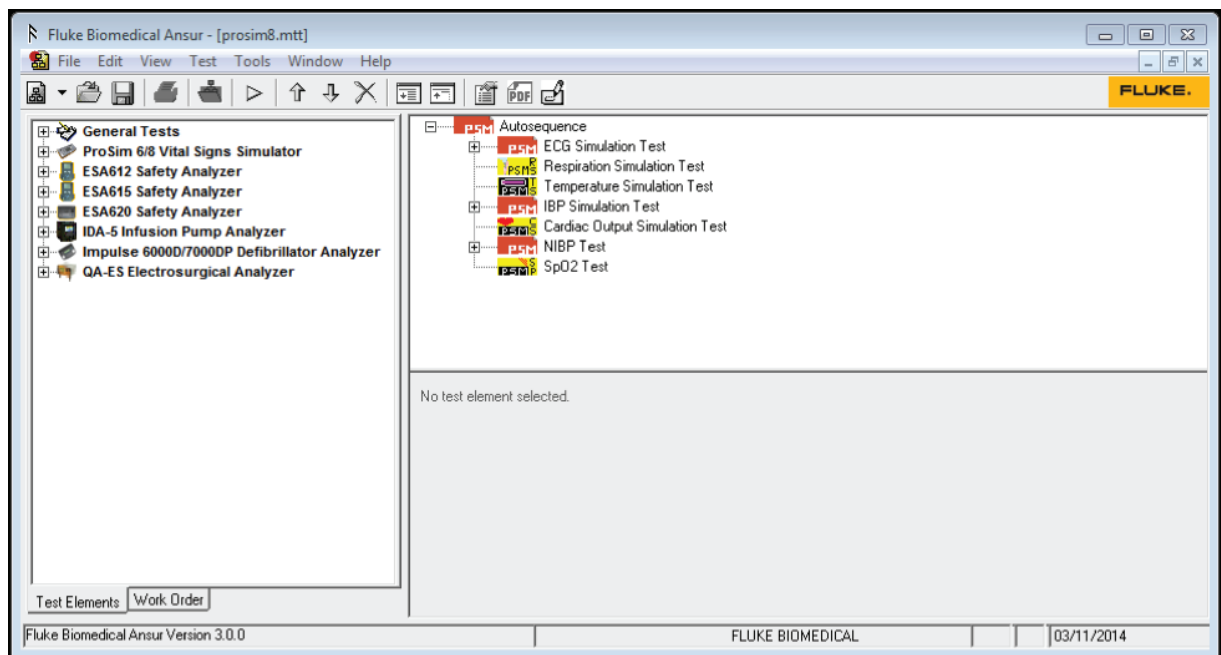

Ansur software test-skabeloner

Bestillingsinformation

Ansurs Executive skal være installeret, før et plug-in kan anvendes. Hvert plug-in er udelukkende til en specifik Fluke Biomedical enhed. En plug-in-licens er gyldig til en enkelt computer. Til flere computere skal der købes flere licenser til det nødvendige plug-in.

Tilgængelige plug-ins

Køb det plug-in, du behøver, og tilføj siden flere plug-in-licenser, efterhånden som du erhverver nye Fluke Biomedical-analyseværktøjer og -simulatorer.

Item#	Model	Produktbeskrivelse
2462982	11000	Ansurs Test Executive, hovedprogram
2463002	11050	Ansurs test-software, QA-ST plug-in
2463016	11200	Ansurs test-software, QA-90 plug-in
2463033	12712	Ansurs test-software, Pro-soft DAEG, test-protokolsoftware
2461775	13600	Ansurs test-software, QA-40M/45 plug-in
2461979	15200	Ansurs test-software, QA-IDS/LAGU plug-in
2462024	16220	Ansurs test-software, QA-VTM plug-in
2462644	17520	Ansurs test-software, QA-1290 plug-in
2556755	20200	Ansurs test-software, ESA601 plug-in-licens
2755836	ANSUR BP PUMPE 2	Ansurs test-software, BP pumpe 2 plug-in-licens
3454829	ANSUR ESA612	Ansurs test-software, ESA612 plug-in-licens
4165219	ANSUR ESA615	Ansurs test-software, ESA615 plug-in-licens
3116463	ANSUR ESA620	Ansurs test-software, ESA620 plug-in-licens
3935677	ANSUR IDA-4 PLUS	Ansurs test-software, IDA-4 Plus plug-in-licens
4354503	ANSUR IDA-5	Ansurs test-software, IDA-5 plug-in-licens
2817641	ANSUR IMPULSE 4000	Ansurs test-software, Impulse 4000 plug-in-licens
3091370	ANSUR IMPULSE 7000	Ansurs test-software, Impulse 6000D/7000DP plug-in-licens
2817203	ANSUR INDEX 2	Ansurs test-software, Index 2 plug-in-licens
4034627	ANSUR PROSIM 6/8	Ansurs test-software, Prosim 6/8 plug-in-licens
2461802	ANSUR QA-ES	Ansurs test-software, QA-ES plug-in-licens
2817226	ANSUR QED 6	Ansurs test-software, QED-6 plug-in-licens
3337356	ANSUR TNT 12000	Ansurs test-software, TNT 12000 plug-in-licens
3837485	ANSUR VT	Ansurs test-software, , VT Plus/VT Mobile plug-in-licens

Fluke Biomedicals lovgivningsmæssige forpligtelse

Som producent af medicinsk testudstyr anerkender og overholder vi visse kvalitetsstandarder, når vi udvikler vores produkter. Vi er ISO 9001- og ISO 13485-certificeret for medicinske enheder, og vores produkter er:

- CE-certificerede, hvor det er påkrævet
- NIST sporbar og kalibreret
- UL-, CSA-, ETL-certificeret, hvor det er påkrævet
- Overholder NRC, hvor det er påkrævet

Fluke Biomedical.

Trusted for the measurements that matter.

Fluke Biomedical
6045 Cochran Road
Cleveland, OH 44139-3303 USA

Fluke Biomedical Europe
Science Park Eindhoven 5110
5692EC Son, The Netherlands

Kontakt os for flere oplysninger:
I USA (800) 850-4608 eller
Fax (440) 349-2307
I Europa/Mellemøsten/Afrika +31 40 267 5435 eller
Fax +31 40 267 5436
Fra andre lande +1 (440) 248-9300 eller
Fax +1 (440) 349-2307
E-mail: sales@flukebiomedical.com
Web: www.flukebiomedical.com

©2015 Fluke Biomedical.
Specifikationer kan ændres uden varsel.
Trykt i USA 3/2015 6004681a-da

Det er ikke tilladt at ændre i dette dokument uden skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.